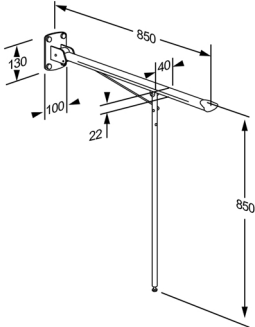




Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret R1101000
Farve	VVS:615722400 NRF:6191641 EAN:5708590176413 HMI: 25412 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Hvid
Produktbeskrivelse	 <p>VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret, opklappelig, totallængde 850 mm, brugshøjde 850 mm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.</p> <p>VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret, opklappelig, totaltotal længde 850 mm, brugshøjde 850 mm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender. Materialer: Rilsan-belagt stål, trykstøbt aluminium og plast. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.</p>
Justerbarhed	Fastmonteret
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 135 kg. Når toiletstøtten belastes med 135 kg, belastes hver vægmonterings skrue med 81 kg.
Materialer	Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. Endepropperne er fremstillet af nylon (PA).
Ergonomi	En god hjælp, når man sidder, står, skal rejse sig og sætte sig. Gode, brede støtteflader for hånd og arm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb, samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender.
Funktioner	Toiletstøtten kan slås op, når den ikke er i brug - eller for at give plads. Med ben for ekstra understøtning.



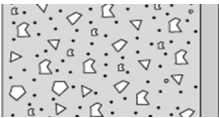
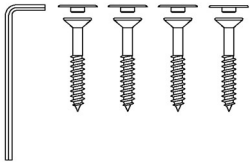

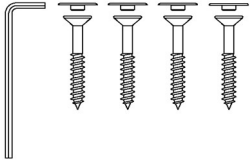
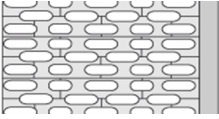
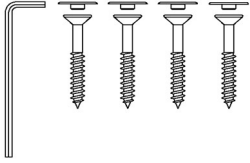
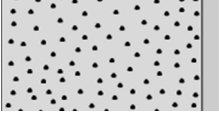
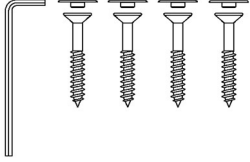
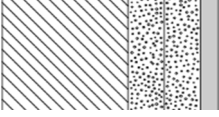
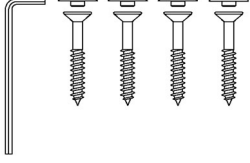
Produkt	VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret
Varenummer	R1101000
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i Direktiv 93/42/EØF vedrørende medicinsk udstyr, senest ændret ved Direktiv 2007/47/EF af 5. september 2007.





Produkt	VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret
Varenummer	R1101000

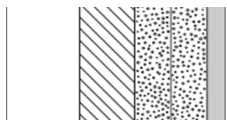
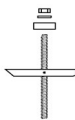


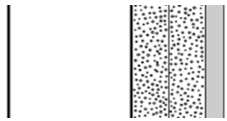
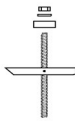


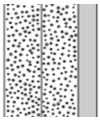

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	





PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret R1101000	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	

Skruer til vægbefæstigelse medfølger. Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekte plugs anvendes. Se venligst monteringsvejledningen.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®